

lipoline®

SOLUTIONS MEDICALES

BOOK LIPOLINE

Obésité



L'expertise du sur mesure

CONTENU

PRESENTATION DE LIPOLINE®.....	1
CERTIFICATS.....	3
LES AVANTAGES.....	4
LES EFFETS DE LA CEINTURE.....	7
LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT.....	8
NOS MATIÈRES.....	9
TYPES DE FERMETURES.....	10
TYPES DE FINITIONS.....	10
LES CEINTURES DE MAINTIEN ABDOMINAL.....	12
SPECIFICITES.....	13
MODELE CULOTTE.....	14
MODELE CULOTTE -Hauts de ceinture.....	16
MODELE CULOTTE - Sous-poitrine.....	19
MODELE CULOTTE - Maintien de poitrine.....	21
MODELE CUISSE.....	24
MODELE CUISSE - Hauts de ceinture.....	26
MODELE CUISSE - Sous-poitrine.....	28
MODELE MOLLET- Sous-poitrine.....	33
MODELE CHEVILLE.....	36
MODELE CHEVILLE - Haut de ceinture.....	38
MODELE CHEVILLE - Maintien de poitrine.....	39
CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL.....	40
LIPOEDEME LYMPHOEDEME.....	43
LIPOEDEME.....	44
LYMPHOEDEME.....	47

PRESENTATION DE LIPOLINE®

L'expertise de la contention sur mesure dans l'obésité.

Une technologie 100% européenne.

Notre histoire, depuis 2010, des ceintures de contention sur mesure ont été spécifiquement conçues pour vous par notre équipe de chirurgiens et d'orthésistes.

Nos orthésistes sont membres de l'équipe pluridisciplinaire de la prise en charge du patient obèse, un relais de votre discours médical.

Notre objectif est d'accompagner le patient tout au long de son parcours bariatrique. Nous avons élaboré à cet effet une méthode basée sur un bilan et un parcours spécifique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la prise de mesure et l'essayage sont réalisés par nos orthopédistes-orthésistes.

Ainsi le patient est équipé du modèle approprié à sa pathologie, sa morphologie, ses activités professionnelles et physiques.

Nous proposons une large gamme composée de Ceintures de Maintien Abdominal (CMA) femme et homme faite de modèles classiques et de modèles destinés à l'activité physique adaptée et de Ceintures de Soutien Abdominal (CSA)

Nous proposons également en partenariat avec notre fabricant LIPOELASTIC a.s. des compléments de gamme (manchons, soutiens gorges, leggings).

Nous nous assignons les objectifs suivants:

1. Accompagner de manière optimum la préparation du patient à l'intervention et faciliter sa réadaptation.
2. Accompagner l'évolution de sa morphologie pour limiter les conséquences d'une perte de poids conséquente.
3. Accompagner sa remobilisation, lui permettre de suivre et valoriser ces progrès.

Les certificats ci-dessous sont la propriété exclusive de LIPOELASTIC a.s. qui assure la fabrication des produits de la marque LIPOLINE®.



CERTIFICATS

Pour nous, la qualité et la sécurité sont primordiales. La qualité ainsi que les matières utilisées pour la fabrication de nos produits sont certifiées. Tous nos produits de la collection LIPOLINE® sont validés par l'orthopédiste agréé.



STANDARD 100 par OEKO-TEX®

Il garantit l'absence de substances nocives ou allergènes dans nos produits. Les matériaux sont testés tous les ans par l'institut de test allemand HOHENSTEIN.




Certification ISO 13485

Les produits LIPOLINE® ont été fabriqués dans un établissement dont le système de management de la qualité est certifié selon la norme ISO 13485.



CE -déclaration de conformité

Les produits LIPOLINE® portent la marque CE conformément aux réglementations légales applicables concernant les dispositifs médicaux.

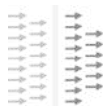

Transfert et évacuation de l'humidité corporelle

La fourchette de la valeur d'évacuation de sueur entre 800 - 900g / m2H est considérée comme excellente. Les résultats des matériaux LIPOLINE® atteignent la valeur de 815 g / m2H.



Elimination de l'humidité

Les résultats du test effectué par le TZU (institut d'essais des textiles) ont démontré que les résultats de l'élimination de l'humidité et de la perméabilité des matières utilisées pour la fabrication de nos produits sont de 85%, ce qui garantit que les patients se sentent au sec pendant le port de notre vêtement de compression.

LES AVANTAGES

Le service de R&D



Même si nos produits rencontrent le succès, nous continuons à rechercher des voies d'amélioration avec le service de R&D de notre partenaire LIPOELASTIC a.s. Celui-ci travaille de manière intense sur l'innovation continue et le développement constant de nos produits, pour atteindre la meilleure qualité. Grâce à notre collaboration avec les meilleurs médecins du monde entier, nous continuons d'améliorer nos produits pour qu'ils soient bien ajustés et pour permettre d'apporter un confort maximal. Notre plus grande récompense est de voir un patient satisfait.

Des technologies modernes



Au cours de notre production, nous utilisons des procédés technologiques les plus modernes. Les technologies avancées Ultrasonic et Hemming permettant la connexion des textiles entre eux, grâce aux principes de soudure et de collage. Grâce à ces méthodes, nos vêtements sont extrêmement résistants et n'ont aucun soucis de coutures déchirées.

Prescription



- a)** Une ceinture de maintien abdominal sur mesure avec adjonction.
- b)** Une deuxième ceinture en mise de secours.

LES AVANTAGES



Fabrication européenne

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité de nos produits. Tous les produits LIPOLINE® sont fabriqués à la main par des couturières expérimentées, et chaque produit est contrôlé en détail avant de procéder à son expédition de notre usine qui se trouve en Union européenne.



Matière exclusive

Nous choisissons soigneusement les matières pour la fabrication de nos produits. Nous prenons particulièrement soin du choix de la qualité des tissus achetés auprès de nos fournisseurs. Nous les achetons exclusivement avec un niveau de qualité qui est certifié et tous proviennent des pays de l'Union européenne, notamment de France.



Coutures plates

Ce sont les petits détails qui comptent pour rendre un vêtement confortable. Les ceintures LIPOLINE® sont cousues à l'aide de "coutures plates" pour assurer aux patients un confort maximal tout en veillant à l'esthétique.



Des outils appropriés

Afin de répondre au cahier des charges de la sécurité sociale, nos produits sont équipés de baleines de maintien (2 devant et 2 à 4 dans le dos) tout en s'adaptant à la morphologie de chaque patient.

LES AVANTAGES



Fabrication sur-mesure

Nous comprenons que chaque patient est unique et a des besoins différents. Pour une meilleure efficacité, la gamme LIPOLINE® est réalisée sur mesure (pour apporter une sensation de deuxième peau) laissant ainsi une multitude de possibilités.



Pourquoi LIPOLINE® ?

La maîtrise de l'ensemble et le respect des normes réglementaires et des procédures en vigueur permettent à la gamme LIPOLINE® d'être conforme aux cahiers des charges de la sécurité sociale.



Pratique

Nous fournissons avec chaque article un filet de lavage extile, afin de protéger les produits lors du lavage.

LES EFFETS DE LA CEINTURE

Bénéfices physiques

En pré-opératoire ou en parcours nutritionnel :

- ✓ Réduis la ptose abdominale (la ceinture de maintien va remonter et plaquer la masse abdominale).
- ✓ Modèle la peau entraînant une diminution des plis et de la macération cutanée.
- ✓ Corrige la posture (le patient obèse avec un ventre proéminent en tablier ou non, est projeté en avant). La ceinture va corriger cet effet en reportant vers l'arrière le centre de gravité et ainsi soulager les vertèbres.
- ✓ Favorise la mobilité, l'exercice physique, la marche.

En post-opératoire:

- ✓ Compense l'insuffisance musculaire de la sangle abdominale.
- ✓ Apporte un effet antalgique (grâce à une compression modérée).
- ✓ Favorise la cicatrisation par le soutien compressif.

Bénéfices esthétiques

- ✓ Améliore la silhouette.
- ✓ Facilite l'habillement.

Bénéfices psychologiques

- ✓ Sécurise le patient du fait de ses propriétés proprioceptives.
- ✓ Favorise l'estime de soi.

LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT

- 1 Prescription médicale et orientation vers l'orthésiste.
- 2 Prise de rendez-vous avec l'orthésiste.
- 3 Prise des mesures.
- 4 Essayage avec l'orthésiste.
- 5 Suivi et contrôle.



NOS MATIÈRES



CLASSIC
matériel

Le matériel CLASSIC est la référence de notre matériel principal, que nous utilisons pour une grande partie de la collection LIPOLINE®. Sa compression est stable et précise, ce qui est généralement considéré comme étant le paramètre le plus important pour les ceintures abdominales. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce matériel est très populaire depuis presque 20 ans. Grâce au contenu de microfibre élastique, il assure l'évacuation de l'humidité et apporte le rafraîchissement agréable de la peau. Ma seconde peau LIPOLINE devient synonyme de bien-être et de confort.



UNIQUE
matériel

Le matériel UNIQUE est spécialement conçu pour les périodes chaudes, car grâce à sa texture micro-perforée avec effet 3D, le tissu vient toucher la peau à des points de contact dispersés, apportant à la peau un effet de massage, optimisant la circulation sanguine et l'oxygénation cutanée. La perforation 3D spécifique évacue l'humidité et maintient un microclimat constant.



COTON

Le COTON est l'une des matières les plus confortables. Il est naturel, respirant et absorbe l'humidité. Nous l'utilisons sur les fermetures au niveau des parties intimes.

TYPES DE FERMETURES

-  **Fermeture par zip**, composée d'un zip, d'une bande de protection pour la peau et d'une rangée d'agrafes pour assurer une manipulation facile.
-  **Fermeture avec 3 rangées d'agrafes et d'œillets**, permettant d'adapter la taille et le niveau de compression selon le changement morphologique.

TYPES DE FINITIONS

ULTRASONIC



La technologie de pointe Ultrasonic permet de souder les tissus ensemble. La finition par cette technologie est très résistante sans risque de coutures déchirées.

DENTELLE



La dentelle tendance sans silicone ne serre pas la jambe, tout en restant suffisamment fixée.


CLEAN-CUT



Certains types de produits sont dotés d'une finition par une simple coupe, pour ne pas serrer ni remonter.

Tous les vêtements LIPOLINE® sont
fabriqués à partir de matériaux
certifiés.

LES CEINTURES DE MAINTIEN ABDOMINAL

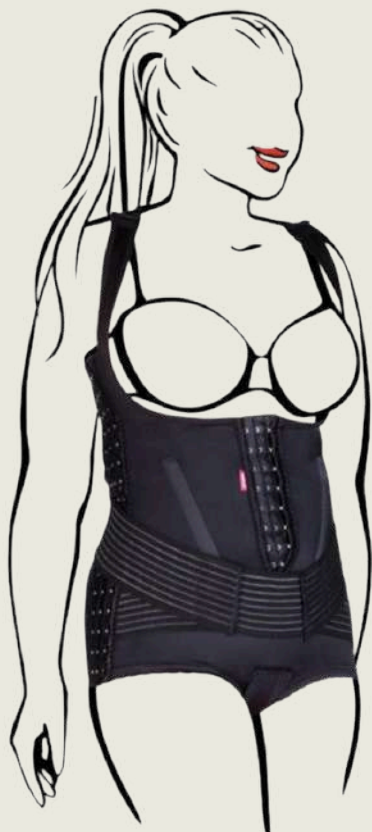

SPECIFICITES

- **Modèles “Duo” :**
 - ✓ Receveur de 12 cm.
 - ✓ Pattes d’entre jambes (PEJ) amovibles avec velcro (2PEJ).
 - **Modèles “Evolution” :**
 - ✓ Pattes d’entre jambes (PEJ) fixe avec velcro.
 - ✓ Receveur de 8 cm.
 - ✓ Tous les modèles “Eté” sont équipés d’agrafes et jamais de ZIP, la PEJ est équipée d’agrafes au lieu de Velcro.
 - **Modèles “Kaps” :**
 - ✓ Destinés aux ventres tombants irréductibles.
 - ✓ Pattes d’entre jambes (PEJ) amovibles avec velcro (2PEJ).
 - ✓ Tirants doubles et pinces.
 - ✓ Receveur de 16 cm.
- Les modèles cuisse, mollet et cheville sont équipées de pattes d’entrejambes (PEJ) fixe avec velcro ou sans PEJ.
- Les modèles “été” sont équipés d’agrafes sur le milieu et d’agrafes sur la PEJ fixe.

MODELE CULOTTE

Femmes



CMA DUO14
CMA30 tissus été



CMA DUO15



CMA DUO22

Hommes



CMA DUO54



CMA DUO63

MODELE CULOTTE- Hauts de ceinture

Description :

- ✓ Dos découvert.
- ✓ Pattes d'entre jambes (PEJ) amovibles avec velcro (2PEJ).
- ✓ Les modèles « été » sont équipés d'agrafes et de PEJ fixe (CMA 30).
- ✓ Ouverture centrale par Zip avec patte de protection et agrafes pour une fermeture facile.
- ✓ Bretelles réglables.



CMA DUO14
CMA30 tissu été



CMA DUO54

CMA DUO14 ou CMA30 (tissus été)

Utilisation: Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œilletons sur les côtés, avec patte entrejambe pour ne pas avoir à se déshabiller, accessoires amovibles et tirant.





Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Patte entrejambe amovible (pour le modèle CMA DUO14).
3. Sangle posturale.
4. Positions de réglage sur chaque côté.
5. Zip avec bande de protection dotée d'une rangée d'agrafes pour une fermeture facile.

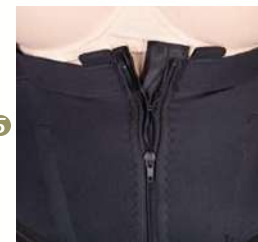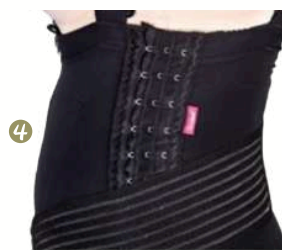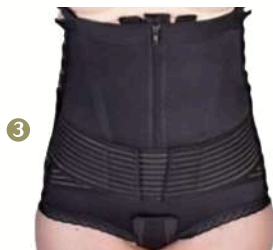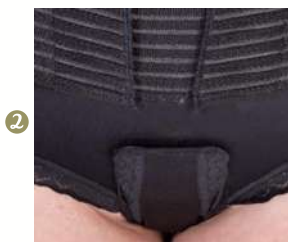

CMA DUO54

Utilisation: Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œilletons sur les côtés, avec patte entrejambe pour ne pas avoir à se déshabiller, accessoires amovibles et sangle posturale.



Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Patte entrejambe avec velcro.
3. Sangle posturale auto-agrippante.
4. 3 positions de réglage sur chaque côté.
5. Zip avec bande de protection dotée d'une rangée d'agrafes pour une fermeture facile.

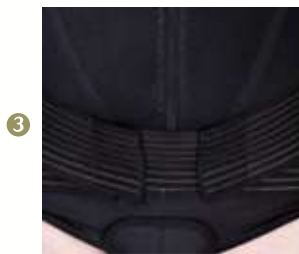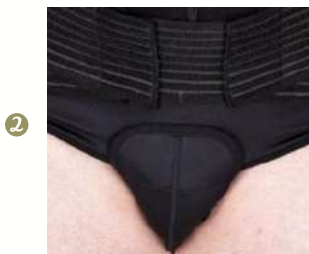

MODELE CULOTTE – Sous-poitrine

Description :

- ✓ Dos couvert.
- ✓ Pattes d'entre jambes (PEJ) amovibles avec velcro (2PEJ).
- ✓ Bretelles réglables.
- ✓ Ouverture centrale par Zip avec patte de protection et agrafes pour une fermeture facile.



CMA DUO15

CMA DUO15

Utilisation: Modèle body avec bretelles réglables, avec patte entrejambe, ouverture centrale par agrafes et œillets, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œillets sur les côtés, dos couvert pour maintenir la posture avec sangle posturale.




Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles réglables.
3. Sangle posturale auto-agrippante.
4. Dos couvert pour un meilleur maintien.
5. Ouverture centrale par agrafes et œillets.

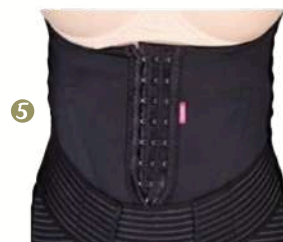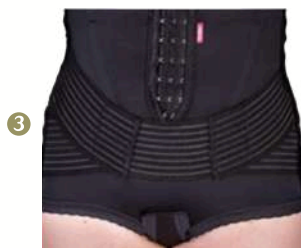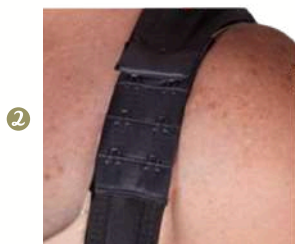

MODELE CULOTTE – Maintien de poitrine

Description :

- ✓ Dos couvert.
- ✓ Pattes d'entre jambes (PEJ) amovibles avec velcro (2PEJ).
- ✓ Bretelles réglables.
- ✓ Ouverture centrale par Zip avec patte de protection et agrafes pour une fermeture facile.



CMA DUO22



CMA DUO63

CMA DUO22

Utilisation: Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip, maintien confortable de la poitrine, dos couvert pour le maintien des muscles dorsaux, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œilletons sur les côtés, avec patte entrejambe pour ne pas avoir à se déshabiller, bretelles réglables, avec sangle posturale.



Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles réglables.
3. Maintien de la poitrine.
4. Dos couvert pour un meilleur maintien.
5. Patte entrejambe avec velcro.

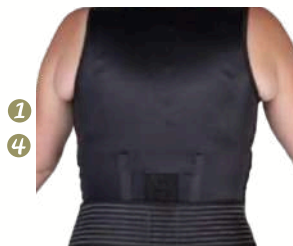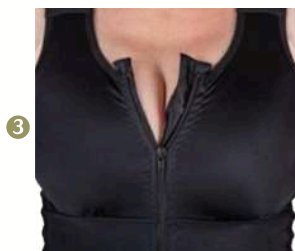

CMA DUO63



Utilisation: Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip, maintien confortable du torse avec dos couvert pour le maintien des muscles dorsaux, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œilletons sur les côtés, avec patte entrejambe pour ne pas avoir à se déshabiller, bretelles réglables, avec sangle posturale.

Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :
1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles réglables.
3. Dos couvert pour un meilleur maintien.
4. Sangle posturale auto-agrippante.
5. Patte entrejambe avec velcro.

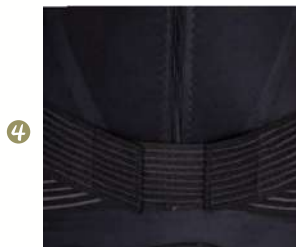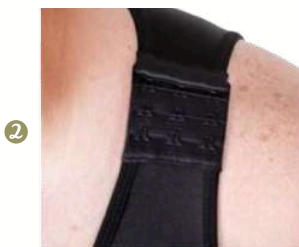

MODELE CUISSE

Femmes



CMA24 ou CMA23
(sans patte d'entrejambe)
ou CMA31
(tissu été)



CMA DUO20



CMA25
CMA DUO21
(agrafes sur toute la hauteur)

Hommes



CMA64
CMA DUO65
(agrafes sur toute la hauteur)

MODELE CUISSE – Hauts de ceinture

Description :

- ✓ Dos découvert.
- ✓ Les modèles « été » sont équipés d'agrafes et de PEJ fixe (CMA31).
- ✓ Ouverture centrale par Zip avec patte de protection et agrafes pour une fermeture facile.
- ✓ Bretelles réglables.



CMA24 ou CMA23
(sans patte d'entrejambe)
ou CMA31
(tissu été)

CMA24 ou CMA23 (sans Patte d'entrejambe) ou CMA31 (tissu été)

Utilisation: Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œilletons sur les côtés, avec patte entrejambe pour ne pas avoir à se déshabiller, bretelles détachables à croiser dans le dos pour aider à la bonne posture, longueur au-dessus des genoux.

Couleurs :  





CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles réglables.
3. Dos couvert pour un meilleur maintien.
4. Sangle posturale auto-agrippante.
5. Patte entrejambe avec velcro.

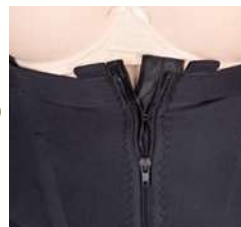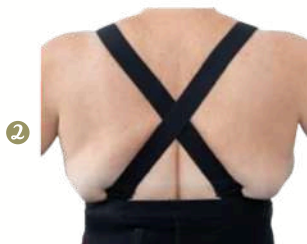

MODELE CUISSE – Sous-poitrine

Description :

- ✓ Dos couvert.
- ✓ Bretelles réglables.
- ✓ Ouverture centrale par Zip avec patte de protection et agrafes pour une fermeture facile.



CMA DUO20

CMA DUO20

Utilisation: Modèle body avec bretelles réglables, avec patte entrejambe, ouverture centrale par agrafes et œillets, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œillets sur les côtés, dos couvert pour maintenir la posture avec sangle posturale.

Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles réglables.
3. Sangle posturale auto-agrippante.
4. Dos couvert pour un meilleur maintien.
5. Zip avec bande de protection dotée d'une rangée d'agrafes pour une fermeture facile.



MODELE CUISSE – Maintien de poitrine

Description :

- ✓ Dos couvert.
- ✓ Bretelles réglables.
- ✓ Ouverture centrale par Zip.



CMA25
CMA DUO21
(agrafes sur toute la hauteur)



CMA64
CMA DUO65
(agrafes sur toute la hauteur)

CMA25

CMA DUO21 (agrafes sur toute la hauteur)

Utilisation: Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip, maintien confortable de la poitrine, dos couvert pour le maintien des muscles dorsaux, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œillets sur les côtés, sans patte entrejambe, bretelles réglables, avec sangle posturale, longueur au-dessus des genoux.



Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles réglables.
3. Maintien de la poitrine.
4. Dos couvert pour un meilleur maintien.
5. Fine finition en dentelle.

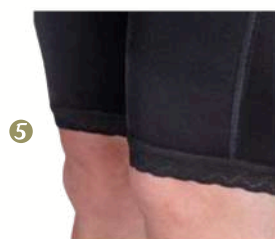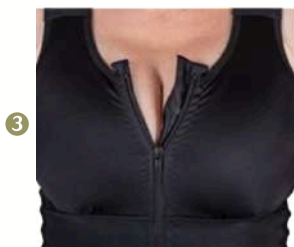

CMA64

CMA DUO65 (agrafes sur toute la hauteur)

Utilisation: Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip. Le zip long à double sens, remplace la patte d'entre-jambes pour ne pas avoir à se déshabiller, maintien confortable du torse avec dos couvert pour le maintien des muscles dorsaux, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œillets sur les côtés, bretelles réglables, avec sangle posturale, longueur au-dessus des genoux.

Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles réglables.
3. Dos couvert pour un meilleur maintien.
4. Sangle posturale auto-agrippante.



MODELE MOLLET

MODELE MOLLET - Sous-poitrine

Description :

- ✓ Dos couvert.
- ✓ Bretelles réglables.
- ✓ Ouverture centrale par Zip avec patte de protection et agrafes pour une fermeture facile.



CMA16

CMA32
(tissu été)

CMA16 ou CMA32 (tissu été)

Utilisation: Modèle body corsaire avec bretelles réglables, sans patte entrejambe, ouverture centrale par agrafes et d'œillets, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œillets sur les côtés, dos couvert pour maintenir la posture et sangle posturale.

Couleurs :  





CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Ouverture centrale par agrafes et œillets.
3. Fine finition en dentelle.
4. Bretelles réglables.
5. Dos couvert pour un meilleur maintien.

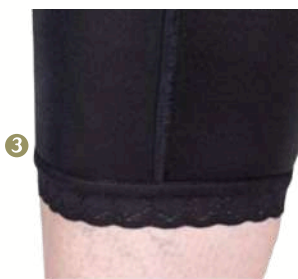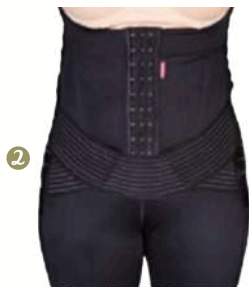

MODELE CHEVILLE

MODELE CHEVILLE

Femmes



CMA27
(sans patte d'entrejambe)



CMA26

MODELE CHEVILLE -Haut de ceinture CMA27

Utilisation: Ouverture centrale avec possibilité de réglage grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œilletons, sans patte entrejambe, bretelles amovibles à croiser dans le dos pour aider à la bonne posture, longueur jusqu'aux chevilles.

Couleurs :  




CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles détachables à croiser dans le dos.
3. Ouverture centrale par agrafes et œilletons.
4. Bretelles réglables.
5. Fine finition par la technologie Clean- Cut.

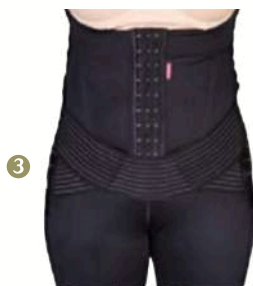

MODELE CHEVILLE -Maintenance de poitrine CMA26

Utilisation: : Habillage facile grâce à l'ouverture centrale par zip, maintien confortable de la poitrine, dos couvert pour le maintien des muscles dorsaux, réglage possible grâce aux 3 rangées d'agrafes et d'œillets sur les côtés, sans patte entrejambe, bretelles réglables, avec sangle posturale, longueur jusqu'aux chevilles.

Couleurs :  
 CLASSIC
Matériel

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles détachables à croiser dans le dos.
3. Ouverture centrale par agrafes et œillets.
4. Bretelles réglables.
5. Fine finition par la technologie Clean- Cut.


2



5



LES CEINTURES DE SOUTIEN ABDOMINAL

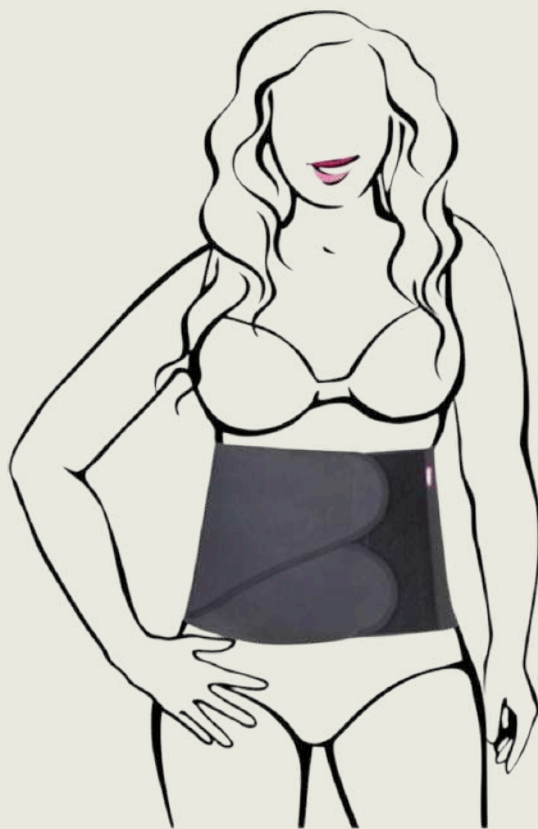

CSA01 ou CSA02

Utilisation : Pour que le produit soit moins salissant en post-opératoire, nous avons sélectionné le coloris noir pour vos ceintures de soutien abdominal. Les bandes d'attaches séparées en velcro sont conçues pour un ajustage et une fermeture plus facile. Le matériel dense assure un maintien parfait.

Couleurs :



CSA01 : hauteur 24cm.

CSA02 : hauteur 32cm.

UNISEXE ♀ ♂

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Sangle flexible.
3. Les bandes d'attaches séparées en velcro sont conçues pour un ajustage et une fermeture plus facile.
4. Matériel dense et serré.



La qualité et la sécurité de nos
produits sont primordiales.

LIPOEDEME LYMPHOEDEME



LIPOEDEME

Qu'est-ce que le lipœdème ?

- Une maladie de stockage pathologique de graisses.
- Une localisation sur les bras, les hanches et les jambes de façon symétrique.
- Etiologie : trouble hormonal, puberté, grossesse, ménopause.

Les symptômes :

- ✓ Impossibilité de perdre du poids.
- ✓ Sensation de jambes lourdes et gonflées.
- ✓ Douleur des membres au toucher et en cas de pression.
- ✓ Disproportion du corps (la partie inférieure est plus épaisse que la partie supérieure).
- ✓ Déformation des membres et « peau d'orange ».
- ✓ Tendance à marquer facilement avec des ecchymoses fréquentes.

Lipœdème et obésité

Les experts rapportent que jusqu'à 85 % des patients atteints de lipœdème sont obèses. Il peut être difficile de diagnostiquer un lipœdème, de le différencier d'un lymphœdème ou de l'obésité, ou de découvrir si deux ou plusieurs maladies sont coexistantes.

Compression graduée

La compression est graduée, c'est-à-dire que la pression la plus forte se situe au niveau de la cheville (ou du poignet) et diminue en remontant le long du membre. Cette graduation permet d'améliorer la circulation sanguine et en plus d'empêcher le retour veineux.

CMA70

Utilisation : : Compression graduée et tricot rectiligne, ouverture centrale par 3 rangées d'agrafes et d'oeillets permettant le réglage. Sans patte d'entrejambe, bretelles détachables à croiser dans le dos pour aider à la bonne posture, la fine finition enveloppant le haut du pied s'adapte à sa forme pour apporter un soulagement immédiat aux jambes lourdes.

Couleurs :  



CLASSIC
Matériel



COMPRESSION
GRADUÉE

Conforme au cahier des charges de la sécurité sociale :

1. Baleines de maintien (2 devant et 2 dans le dos).

Description du produit:

2. Bretelles détachables à croiser dans le dos.
3. Ouverture centrale par agrafes et œillets.
4. Compression graduée.
5. Fine finition par la technologie Clean- Cut.



LIPO SLIDE F



D'autres modèles existent dans la collection
LIPOELASTIC :

- LEGGINGS
 - ✓ TBflg variant
 - ✓ TBflg leggings

- MANCHONS
 - ✓ AP long variant
 - ✓ MTf smooth comfort

LYMPHOEDEME

Qu'est-ce que le lymphœdème ?

Le système lymphatique est formé avec des ganglions lymphatiques, des capillaires lymphatiques et des vaisseaux lymphatiques. Le lymphœdème est une maladie de longue durée (chronique) causée par des vaisseaux lymphatiques endommagés ou absents.

Les symptômes :

- ✓ Enflure de vos bras et vos jambes, ou autres parties du corps.
- ✓ Sensation de jambes lourdes et de serrement.
- ✓ Douleur ou de l'inconfort.
- ✓ Changements de la peau.
- ✓ Réduction de la mobilité ou de l'amplitude des mouvements.
- ✓ Les vêtements et les bijoux (surtout les bagues et les bracelets) semblent beaucoup plus serrés que d'habitude.

lymphœdème et obésité

Les experts rapportent qu'ils existent une corrélation entre lymphœdème et obésité, effectivement l'obésité pouvant être un facteur aggravant. Il peut être difficile de diagnostiquer un lymphœdème, de le différencier d'un lipœdème ou de l'obésité, ou de découvrir si deux ou plusieurs maladies sont coexistantes.

Compression graduée

La compression est graduée, c'est-à-dire que la pression la plus forte se situe au niveau de la cheville (ou du poignet) et diminue en remontant le long du membre. Cette graduation permet de déplacer le liquide lymphatique vers le centre de votre corps, où il peut être drainé correctement. La compression déplace ce liquide hors du membre atteint et en plus d'empêcher son retour.

L01 - 02 shorts



Panty short homme avec doublure pour œdèmes dans la zone génitale; ces modèles sont utilisés pour les patients avec des œdèmes dans la zone génitale à grand volume. La différence entre les 2 modèles est le taux de compression qui est de 15% pour le L01 et 20% pour le L02. Ces modèles existent aussi en version longueur au niveau des mollets et en longueur aux chevilles, chaque longueur est avec finition par clean cut/coupe droite au laser.

L03 - 04 shorts with fly



Panty short homme avec doublure pour œdèmes dans la zone génitale; ces modèles sont utilisés pour les patients avec des œdèmes dans la zone génitale à grand volume. La différence entre les 2 modèles est le taux de compression qui est de 15% pour le L01 et 20% pour le L02. Ces modèles existent aussi en version longueur au niveau des mollets et en longueur aux chevilles, chaque longueur est avec finition par clean cut/coupe droite au laser.

L31- 32 shorts



Panty short femme avec pelotes de rembourrage pour œdèmes dans la zone génitale et ventre. La différence entre les 2 modèles est le taux de compression qui est de 15% pour le L31 et 20% pour le L32. Ces modèles existent aussi en version longueur au niveau des mollets et finition en dentelle et en version longueur aux chevilles avec finition par clean cut/coupe droite au laser donc pas de dentelle



SG sur mesure L41 bra- L42 bra (avec poche)

Couleurs : ☐ ☒
 CLASSIC
dry

Description du produit:

L41 bra (Soutien-gorge sans poches intérieures ; sans couture au niveau des bonnets grâce au moulage à chaud, avec bonnet maximal E correspondant au circonférence 122 cm.

L42 bra avec poche (soutien-gorge avec poches intérieures pour prothèses, sans couture au niveau des bonnets grâce au moulage à chaud, avec bonnet maximal E correspondant au circonférence 122 cm).



Notre qualité à votre service.

NOTES

NOTES

The logo for lipoline, featuring the word "lipoline" in a stylized font. The "li" is in a light olive green outline, "po" is in a medium olive green outline, and "line" is in a solid dark olive green. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "e".

lipoline®

SOLUTIONS MEDICALES

www.lipoline.fr